


Analiz Esnasında Hata Kaynakları

Analiz sonucuna doğrudan etki

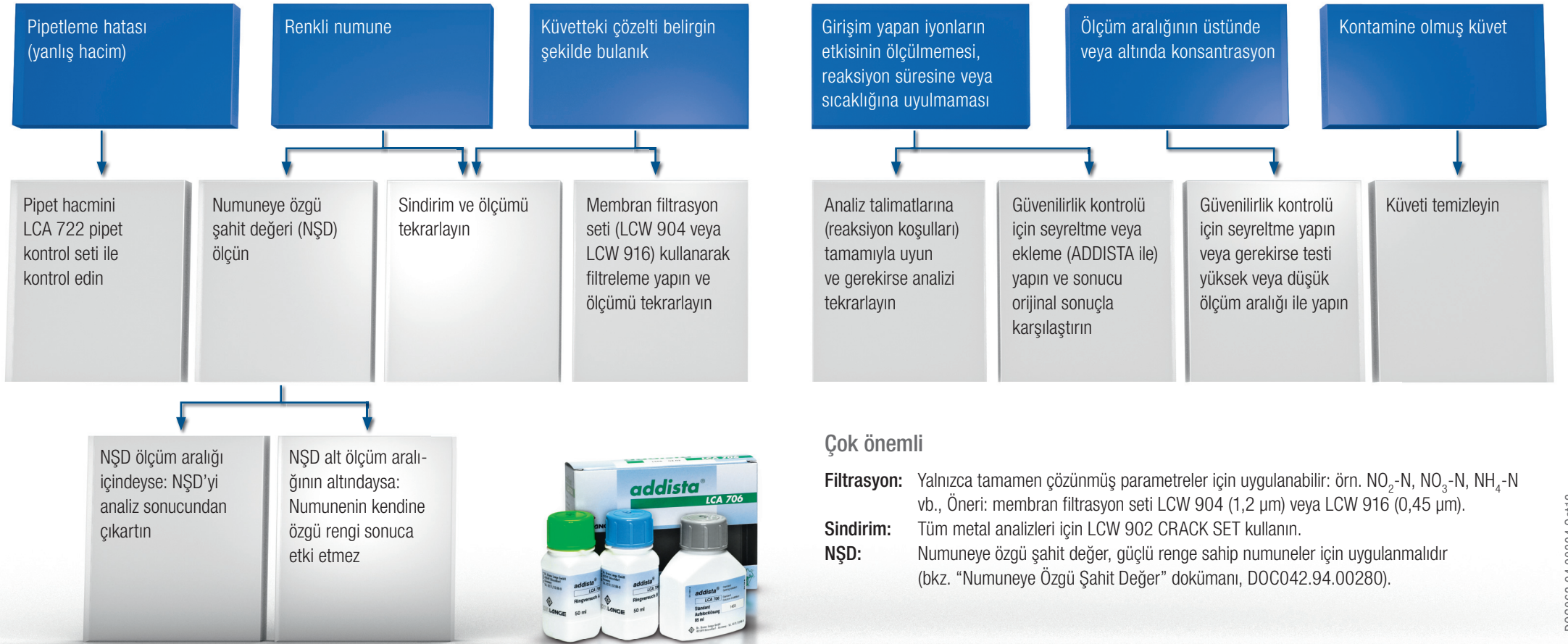

Çok önemli

Filtrasyon: Yalnızca tamamen çözünmüş parametreler için uygulanabilir: örn. $\text{NO}_2\text{-N}$, $\text{NO}_3\text{-N}$, $\text{NH}_4\text{-N}$ vb., Öneri: membran filtrasyon seti LCW 904 (1,2 μm) veya LCW 916 (0,45 μm).

Sindirim: Tüm metal analizleri için LCW 902 CRACK SET kullanın.

NŞD: Numuneye özgü şahit değeri, güçlü renge sahip numuneler için uygulanmalıdır (bkz. "Numuneye Özgü Şahit Değeri" dokümanı, DOC042.94.00280).

Yüksek sonuç güvenilirliği için en önemli ön koşul, tüm analiz sisteminin **düzenli** olarak kontrol edilmesidir: pipetler, fotometre, reaktifler ve genel kullanım. Bu kontrol, AKG sistemi ADDISTA ile oldukça kolaylaşır.



İletişim: 0312 490 83 00
bilgi@hach-lange.com.tr
www.hach-lange.com.tr

HACH LANGE
UNITED FOR WATER QUALITY